

TAXIDEN[®]

Biochemical identification strips



SIMPLICITY ● inoculum simplified with Inoclic[®] : work starting from only one colony, very little handling, very simple use.

EASY READING ● change of color if tests are positive.

VISUAL MONITORING ● all the results can be controlled visually.

ECONOMIC ● no control of purity ; reduced size involving few waste.

FLEXIBILITY ● strips adapted to each type of organisms.


SPEED ● instantaneous reading with SirScan[®]Micro.

TRACEABILITY ● SirScan[®]Micro is the only system which ensures a complete traceability of results, the management of the batches and expiry dates.


Operating instructions TAXIDEN® strips

TAXIDEN® strips reading TAXIDEN®, identification motor

- **TAXIDEN® Software.** Entry of the results in the software, displaying/printing of the results.

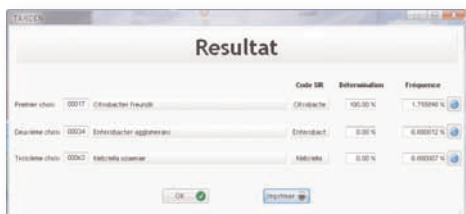

- **SirWeb® TAXIDEN® Software.** Entry of the results in the software, displaying/printing of the results.

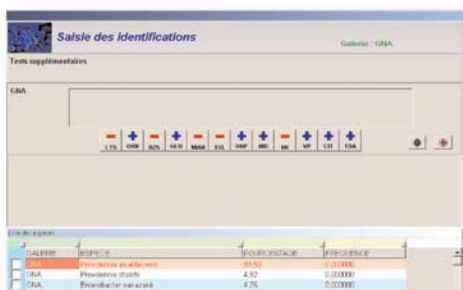


- **Instantaneous automatic reading by the reader SirScan® Micro+.** Automatic backup of all images.



Diagram of use for the TAXIDEN® identification strips


Realisation of inoculum

- ➔ With Inoclic® only one colony is sufficient (except streptococci : 2 Mac Farland)

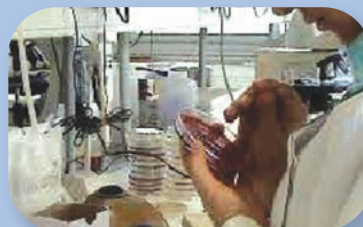

Inoculation of strips

- ➔ Using a pipette, deposit of 100 µl in each well (plus hippurate test for streptococci)
- ➔ Addition of paraffin oil in the black wells

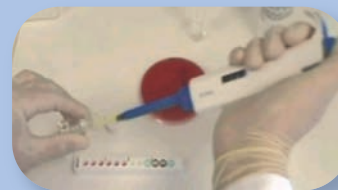

Incubation and revelation

- ➔ Incubation during 18/24 hours at 35°C-37°C (except not fermenting, 48 hours)
- ➔ Addition of the revelation reagents in the specific wells



The TAXIDEN® products

Identification strips

- TAXIDEN® GNA(réf : 010001)
- TAXIDEN® GNB (réf : 010002)
- TAXIDEN® Staph(réf : 010003)
- TAXIDEN® Strepto(réf : 010004)
- TAXIDEN® Bacillus(réf : 010005)
- TAXIDEN® Listeria(réf : 010006)

Systems of reading

- TAXIDEN®, strip reading software..... (réf : TAXIDEN)
- SirWeb TAXIDEN®, organisms' identification(réf : SIRW-TAXIDEN)
- SIRSCAN MICRO+(réf : PAFR05-SMICR+)
- SIRSCAN MICRO ID.....(réf : PAFR06-sµ-ID)

Additional reagents

- TAXIDEN® Paraffin oil..... (réf : 010010)
- TAXIDEN® Nitrate A.....(réf : 010011)
- TAXIDEN® Nitrate B..... (réf : 010012)
- TAXIDEN® VP I..... (réf : 010013)
- TAXIDEN® VP II..... (réf : 010014)
- TAXIDEN® TDA..... (réf : 010015)
- TAXIDEN® Indole Kovacs.....(réf : 010016)
- TAXIDEN® PYR..... (réf : 010017)
- TAXIDEN® Nihydrin..... (réf : 010018)